




\* すみれ = 스미레, 시니어용품 전문 브랜드

미소와 미소로 하나되는 마음  
**시니어용품 종합카탈로그**

**INQAC** (주)이노악 코리아

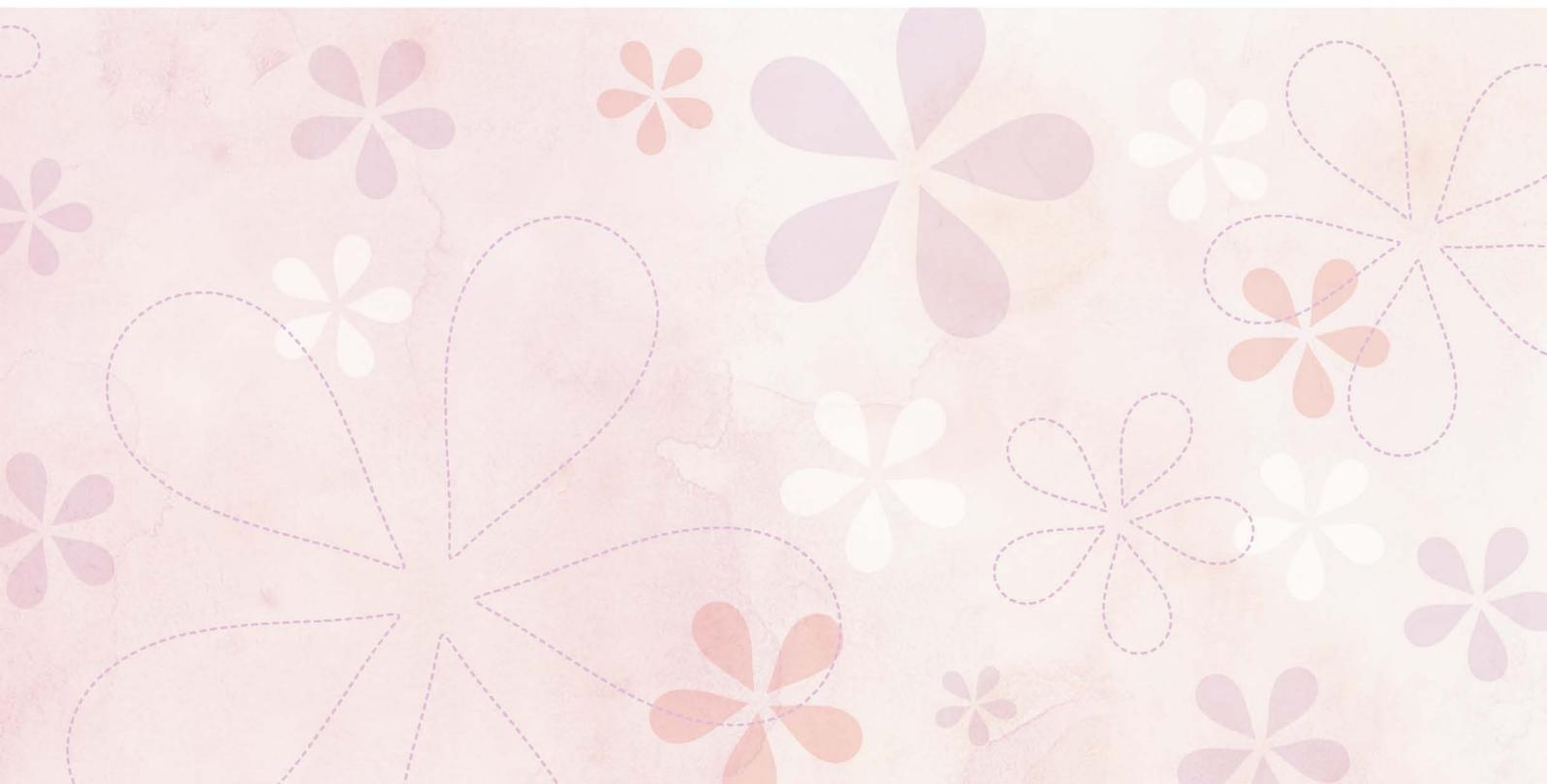

# “미소와 미소로 하나되는 마음”의 실현을 위하여

이노악 코퍼레이션은 1955년 일본에서 최초로 우레탄폼을 생산하여 현재 아시아에서 생산량 1위를 자랑하고 있습니다.

이 기술은 자동차와 전자, IT, 주거환경 등의 산업용 부자재부터 가구, 스포츠, 생활용품, 잡화 등 여러분의 생활에 가장 밀접한 곳에서 활용되고 있습니다. 그리고 1997년부터 직접 신체부위에 닿는 부분의 부드러움을 추구한 고품질의 시니어용품 사업을 확장시켜 왔습니다.

2002년에는 일본육창학회와 공동 개발한 ‘리버서블 PRO 매트리스’를 출시하였습니다.


이노악 코퍼레이션은 사용하시는 모든 분에게 웃음과 편안함을 제공하고자 제품생산을 시작하였으며, 2014년에는 시니어용품 전문브랜드 ‘스미레’를 탄생시켰습니다.

“미소와 미소로 하나되는 마음”의 실현을 목표로 ‘스미레’는 앞으로도 발전해 나갈 것입니다.

## History

1955

아시아 최초로  
우레탄폼 생산

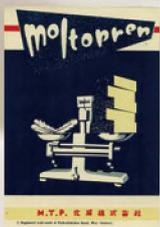

몰트플렌 카탈로그

1997

복지용구 개발 시작



제1호 상품 유프렉스

2002

리버서블 PRO 매트리스 판매개시



리버서블 PRO 매트리스

2014

‘스미레’ 브랜드 런칭



스미레 브랜드 로고

## Index

---

p.04 이노악과 스미레에 대하여

p.06 스미레 제품 라인업

### 매트리스

p.08 리버서블 PRO 매트리스 프리미엄

p.10 리버서블 PRO 매트리스

p.12 라이트 PRO 매트리스

p.13 콤포트 PRO 매트리스

p.14 Airflow 매트리스

### 쿠션

p.16 후와모 쿠션

p.18 써티패드

p.20 파인비즈 쿠션

p.21 면소재 커버쿠션

### 그 외 상품

p.22 Swimo (스이모)

p.23 로코모매트 (롱 타입)

p.23 로코모매트

p.24 충격방지침대II

p.25 베드 사이드매트II

p.26 탐매트 드라이

P.27 소프트 벽쿠션

p.27 욕실 쿠션매트

p.27 소프트 발보호대

p.28 이노악 코퍼레이션에 대하여

p.31 상품일람표

# 우레탄폼 개발 60년의 역사가 만들어낸 세계 최고의 기술력

수많은 새로운 기술들을 개발하여 우레탄폼 제품을 세상에 알려온 이노악은 세계최고기술의 고분자 화학기업으로 차별화된 제품개발에 전념하고 있습니다.

## INOAC Technical Center

우레탄, 고무, 플라스틱, 복합소재를 취급하는 이노악의 R&D센터로써 1986년에 설립하여 새로운 소재와 기술 등의 연구개발을 실시하고 있습니다.



ITC JAPAN



ITC CHINA



ITC THAILAND



ITC USA

## 우레탄폼의 기술력

이노악은 지금까지 수 많은 우레탄폼 제품의 개발을 통해 독자적인 기술을 보유하고 있으며, 이러한 기술은 '스미레'에서도 만나볼 수 있습니다.



### Mixel CUBE

체위변환용 쿠션 '후와모'에 사용되고 있는 특허기술. 우레탄폼을 균일한 주사위 모양으로 만든 쿠션재입니다. 통기성이 좋고 탄성력도 뛰어나습니다.



### 몰드성형

우레탄폼을 금형에 주입한 성형방법으로 금형의 모양대로 제품을 만들어 낼 수 있습니다. 연질부터 저반발, 고탄성 제품까지 다양한 우레탄폼으로도 몰드성형이 가능합니다.



### 3차원 와이어 커팅

오래된 상품개발 역사가 만들어낸 설계 공학으로 우레탄폼의 특징을 최대한 살린 가공법입니다. 복잡한 곡선도 가공이 가능하기 때문에 다양한 상품에 이 가공법이 활용되고 있습니다.





# 「스미레」 라인업

## 매트리스

침대에서 지내는 시간이 길면 길수록 잠자리가 편한 침대를 선호합니다.

사용자의 욕창발생 리스크와 건강상태 등을 종합적으로 판단하여 단계별 적절한 매트리스를 사용하는 것이 가장 중요합니다.

욕창 치료단계에서는 에어 매트리스보다 우레탄 매트리스가 적합하다고 합니다. 또, 치료뿐만 아니라 재발방지에도 효과적입니다.

OH스케일의 단계에 맞게 체압분산 성능을 선택할 수 있도록 다양한 라인업의 매트리스를 보유하고 있습니다.



## OH 스케일 산출

4가지 질문만으로 간단하게 80가지 상태를 판정할 수 있습니다.

### Q1

침대 위에서 몸을 뒤집거나 움직일 수 있습니까?

움직일 수 있다 ..... 0점  
해당사항이 없다 ..... 1.5점  
움직일 수 없다 ..... 3점

### Q2

엉덩이의 뼈가 튀어나왔을 경우 다음 중 어디에 해당됩니까?

정상 ..... 0점  
낮음 · 중간 ..... 1.5점  
높음 ..... 3점

### Q3

부종이 있습니까?

아니오 ..... 0점  
예 ..... 3점

※선골 : 골반 중앙에 있는 꼬리뼈의 상부뼈

## OH 스케일이란?

과학적 근거에 기반한 기술로  
체압분산 용구 선정 기준의  
진단방법.

후생노동성의 욕창 연구에  
의한 800여 가지 이상의 임상  
데이터를 분석하여 고안한  
욕창발생 평가방식입니다.

-  ..... 투습타입
-  ..... 방수타입
-  ..... 세탁가능
-  ..... 제균효과

[체압분산력]

낮음 ●●●●● 높음

[경도]

딱딱함 ●●●●● 부드러움

[이동]

자립 ●●●●● 부족



**Airflow 매트리스**  
p.14



딱딱함  
낮음

움직임이  
쉬움

## ❀ 그 외 스미레 상품

매트리스 뿐만 아니라 자세변환용구와 충격흡수소재 등, 우레탄 폼의 성질을 살린  
다양한 복지용구와 세심한 상품구성으로 건강한 생활을 지원합니다.

### 쿠션



후와모 쿠션

써티패드

파인비즈 쿠션

면소재 커버쿠션

### 그 외 상품



SWIMO(스이모)

로코모매트

충격방지침대II

베드 사이드매트II



탐매트 드라이

소프트 벽쿠션

욕실 쿠션매트

소프트 발보호대

## Q4

관절이 굳어 손발의  
움직임이 불편한가요?

아니오 ..... 0점  
예 ..... 1점

## 합계 점수

점

0점..... 욕창발생 가능성이 제로에 가까움  
1~3점 ..... 욕창발생 가능성이 조금 있음  
4~6점 ..... 욕창발생 가능성이 높음  
7~10점 ..... 욕창발생 가능성이 상당히 높음

스미레에서 사용 중인 매트리스용 방수커버는  
제균가공으로 SEK표시 인증을 취득하였습니다.

늘어나는 소재로 우레탄폼의  
특징을 살린 방수커버는 섬유  
기능가공에 대해 인증하는 일반  
사단법인 섬유평가기술협의회  
에서 제균가공으로 SEK표시를  
취득하였습니다.  
섬유상의 세균 증식을 막아  
청결을 오랜 시간 유지할 수  
있습니다.



**제균가공**

(섬유상의 세균 증식을 억제합니다)  
인증번호 009SE16  
일반사단법인 섬유평가기술협의회  
제조자명 : 은 제오라이트  
코마츠세이렌 주식회사

욕창 발생 리스크가 높은분부터 재발예방까지 대응가능

의장등록완료

두 종류의 우레탄폼 특징을 살릴 수 있는 특수가공을 실시.  
 다양한 각도로 가변하는 형태를 매트리스에 접목.  
 습기가 잘 빠져나가는 기능도 보유하고 있습니다.




# 리버서블 PRO 매트리스 프리미엄



## 뛰어난 체압분산성능


양면으로 사용 가능하기 때문에 욕창 매트리스로서 다양하게 활용 가능합니다. 확실한 체압 분산과 기분 좋은 잠자리를 동시에 느끼실 수 있습니다.

저반발면

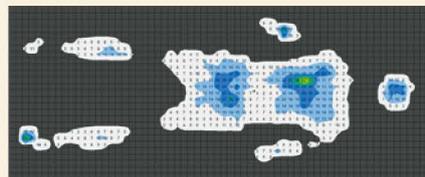


낮은 체압을 실현

고반발면

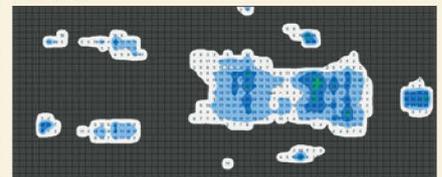

(당사규정)

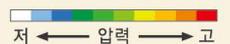

## 습기제거 및 방수커버

우레탄폼의 장점을 살리기 위해 커버 제조업체와 공동개발하여 만든 매트리스 커버. 신축성 있는 소재로, 주름이 생기지 않아 편안한 잠자리를 제공합니다. 더욱이, 방수가 되면서 습기를 차단해주는 특징이 있으며 우레탄폼의 성능과 정교한 모양과 어울려, 땀이 차는 것을 막아주는 효과가 있습니다. 오염물질은 커버안으로 들어가지 않고 공기만을 통과시키기 때문에 청결한 상태를 오래 유지할 수 있습니다.



신축성있는 소재



방수 · 습기통과

# Reversible

욕창 발생 리스크가 높은 분부터 중간이신 분까지 대응

## ✿ 포근히 감싸주는 저반발면

체압분산에 적합한 부드러운 우레탄폼

소프트하게 신체를 감싸주는 초고밀도 메모리폼. 장시간에 걸쳐 안정적으로 체압을 분산시켜 줍니다.




욕창 재발방지시기의 자립지원

## ✿ 확실히 신체를 지탱해주는 고탄성면

적당히 부드러우면서 탄성이 있는 우레탄폼

적당히 지지력이 있으며 자립지원을 촉진하는 고탄성 우레탄폼. 신체형상에 맞게 컷팅한 돌기부분들이 신체를 지탱해주어, 부드럽게 감싸주는 것은 물론이고 뒤척임이 잘 되도록 도와줍니다.

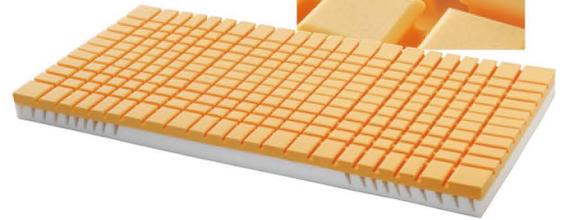

## 특수가공으로 매트리스에 다각도의 가변성을 부여

입체적인 특수가공법을 이용하여 침대 리클라이닝 사용시 매트리스의 변형을 막아 줍니다. 또한, 이노악에서 특허를 받은 비스듬하게 컷팅된 특수가공은, 저반발면이 상부일 경우, 리클라이닝 사용시 상부 복부의 압박을 경감시켜 줍니다. 신체형상에 맞춰 컷팅된 면 또한 변형되기 때문에 체압분산성능도 높혀 줍니다.



■ 선택기준

[체압분산력]

낮음 ●●●●● 높음

[매트리스의 경도]

딱딱함 ●●●●● 부드러움

[이동]

자립 ●●●●● 도움필요



상품명	품번	JAN코드 - TAIS코드	사이즈	중량	정가
리버서블 PRO 매트리스 프리미엄(폭91)	KG1416	JAN 4971458665720 TAIS 00357-000095	폭91 × 길이 191 × 두께 12cm	13Kg	별도 문의
리버서블 PRO 매트리스 프리미엄(폭83)	KG1415	JAN 4971458665713 TAIS 00357-000096	폭83 × 길이 191 × 두께 12cm	12Kg	

■ 재질 / 우레탄폼(2층)      ■ 컬러 / 옐로우, 오렌지  
 ■ 커버 / 폴리에스테르 100%, 우레탄폼 라미네이트, 투습/방수/특정용도제균/난연가공



실용실안 신청완료

욕창 발생 리스크 중간부터 재발예방까지 대응가능

# 리버서블 PRO 매트리스


부드러운 정도가 다른 두가지 우레탄폼을 합쳐 만든  
일본 최초 이노악의 체압분산 매트리스



## 뛰어난 체압분산성능


양면으로 사용 가능하기 때문에 욕창 매트리스로서 다양하게 활용 가능합니다. 확실한 체압 분산과 기분 좋은 잠자리를 동시에 느끼실 수 있습니다.

저반발면

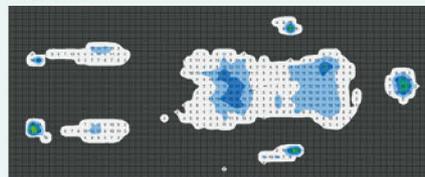

낮은 체압을 실현

고반발면

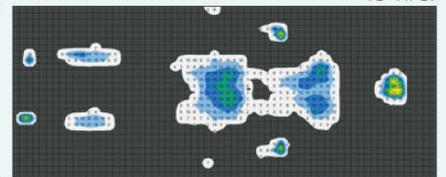

(당사규정)

저 ← 압력 → 고

## 우레탄폼을 살려주는 커버

우레탄폼의 장점을 살리기 위해 커버 제조업체와 공동개발하여 만든 매트리스 커버. 늘어나는 소재로 주름이 생기지 않아 편안한 잠자리를 제공합니다. 또한 방수지퍼가 달려 있어 우레탄폼으로 오염물질이 들어가는 것을 막아주기 때문에 청결함을 오래 유지할 수 있습니다.



신축성있는 소재



관리하기 편리

# Reversible

욕창 발생 리스크가 높은 분부터 중간이신 분까지 대응 가능

## ✿ 포근히 감싸주는 저반발면

체압분산에 적합한 부드러운 우레탄폼

소프트하게 신체를 감싸주는 밀도가 높은 메모리폼.  
신체를 적절히 감싸주면서 장시간에 걸쳐 안정적으로 체압을 분산시켜 줍니다.



재발방지시기의 자립지원

## ✿ 확실히 신체를 지탱해 주는 고탄성면

적절한 부드러움으로 신체를 감싸주는 우레탄폼

탄력있는 고탄성 우레탄폼.  
너무 딱딱하지 않기 때문에 마르신 분도 편하게 이용하실 수 있습니다.



## 다양한 욕창발생 리스크에도 단 하나로 해결

욕창발생 리스크가 높으신 분

### 메모리폼면

부드러운 면으로 체압을 분산시켜 주어 욕창발생 위험을 억제해 줍니다.



욕창발생 리스크가 중간이신 분

### 메모리폼면

욕창발생 위험이 줄어들었다고 해서 갑자기 딱딱한 매트리스를 사용하게 되면 재발 가능성이 있습니다.



재발예방시기이신 분

### 메모리폼면 혹은 고탄성면

움직이기 쉬운 딱딱한 매트리스로의 전환시기에 사용하시면 됩니다.  
사용자의 욕창발생 리스크에 맞게 사용면을 선택해 주세요.



#### ■ 선택기준

[체압분산력]

낮음 ●●●●● 높음

[매트리스의 경도]

딱딱함 ●●●●● 부드러움

[이동]

자립 ●●●●● 도움필요

#### ■ 대상자의 OH 스케일 기준



상품명	품번	JAN코드 - TAIS코드	사이즈	중량	정가
리버서블 PRO 매트리스 (폭91)	URP-101	JAN 4905564060810 TAIS 00357-000020	폭91 × 길이 191 × 두께 12cm	13Kg	별도문의
리버서블 PRO 매트리스 (폭83)	URP-103	JAN 4905564060087 TAIS 00357-000007	폭83 × 길이 191 × 두께 12cm	12Kg	

■ 재질 / 우레탄폼(2층)      ■ 컬러 / 라이트 그린, 다크 그린  
■ 커버 / 폴리에스테르 100%, 우레탄폼 라미네이트, 투습/방수/특정용도제균/난연가공



야원 분과 욕창 발생 리스크가 낮은 분에 해당

# 라이트 PRO 매트리스

8.5cm로 두께가 얇으면서도 높은 체압분산성을 발휘. 욕창 위험 리스크가 낮은 분께 적합합니다.



## 체압분산

2층의 우레탄폼으로 체압을 확실하게 분산시켜 주어 욕창 발생 위험을 경감시켜 줍니다.

## 유지관리도 수월

특정용도 제균가공된 커버사용. 관리가 수월하며 들고 옮기기 편하게 손잡이가 달려있습니다.



옮기기 편리



관리하기 편리

■ 선택기준

[체압분산력]

낮음 ●●●●● 높음

[매트리스의 경도]

딱딱함 ●●●●● 부드러움

[이동]

자립 ●●●●● 도움필요



상품명	품번	JAN코드 - TAIS코드	사이즈	중량	정가
라이트 PRO 매트리스 (폭 91)	ULP-101	JAN 4905564060858 TAIS 00357-000022	폭91 × 길이 191 × 두께 8.5cm	10Kg	별도문의
라이트 PRO 매트리스 (폭 83)	ULP-103	JAN 4905564060100 TAIS 00357-000012	폭83 × 길이 191 × 두께 8.5cm	9Kg	

■재질 / 우레탄폼(2층) ■컬러 / 라이트 그린 ■커버 / 폴리에스테르 100%, 우레탄폼 라미네이트, 투습/방수/특정용도제균/난연가공

욕창재발 방지용

# 컴포트 PRO 매트리스

가볍워서 운반이 용이하며 내구성이 높아 욕창 방지용으로 탁월합니다.



## ✿ 체압분산

적당한 체압분산능을 확보하면서도 무게가 가볍기 때문에 편안한 잠자리를 느끼실 수 있습니다.

## ✿ 유지관리도 수월

특정용도 제균가공된 커버 사용. 관리가 수월하며 우레탄폼의 장점도 발휘합니다. 들고 옮기기 편하게 손잡이가 달려있습니다.



옮기기 편리



관리하기 편리

### ■ 선택기준

[체압분산력]

낮음 ●●●●● 높음


[메트리스의 경도]

딱딱함 ●●●●● 부드러움

[이동]

자립 ●●●●● 도움필요

### ■ 대상자의 OH 스케일 기준

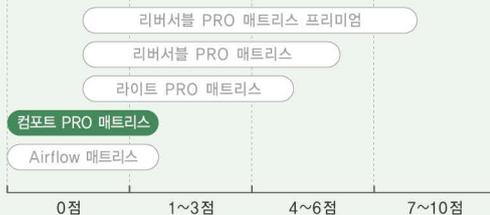


상품명	품번	JAN코드 - TAIS코드	사이즈	중량	정가
컴포트 PRO 매트리스 (폭 91)	CFP-101	JAN 4905564061350 TAIS 00357-000031	폭91 × 길이 191 × 두께 8.5cm	8Kg	별도문의
컴포트 PRO 매트리스 (폭 83)	CFP-103	JAN 4905564061367 TAIS 00357-000031	폭83 × 길이 191 × 두께 8.5cm	7Kg	

■ 재질 / 우레탄폼(2층)

■ 컬러 / 다크 그린

■ 커버 / 폴리에스테르 100%, 우레탄폼 라미네이트, 투습/방수/특정용도제균/난연가공

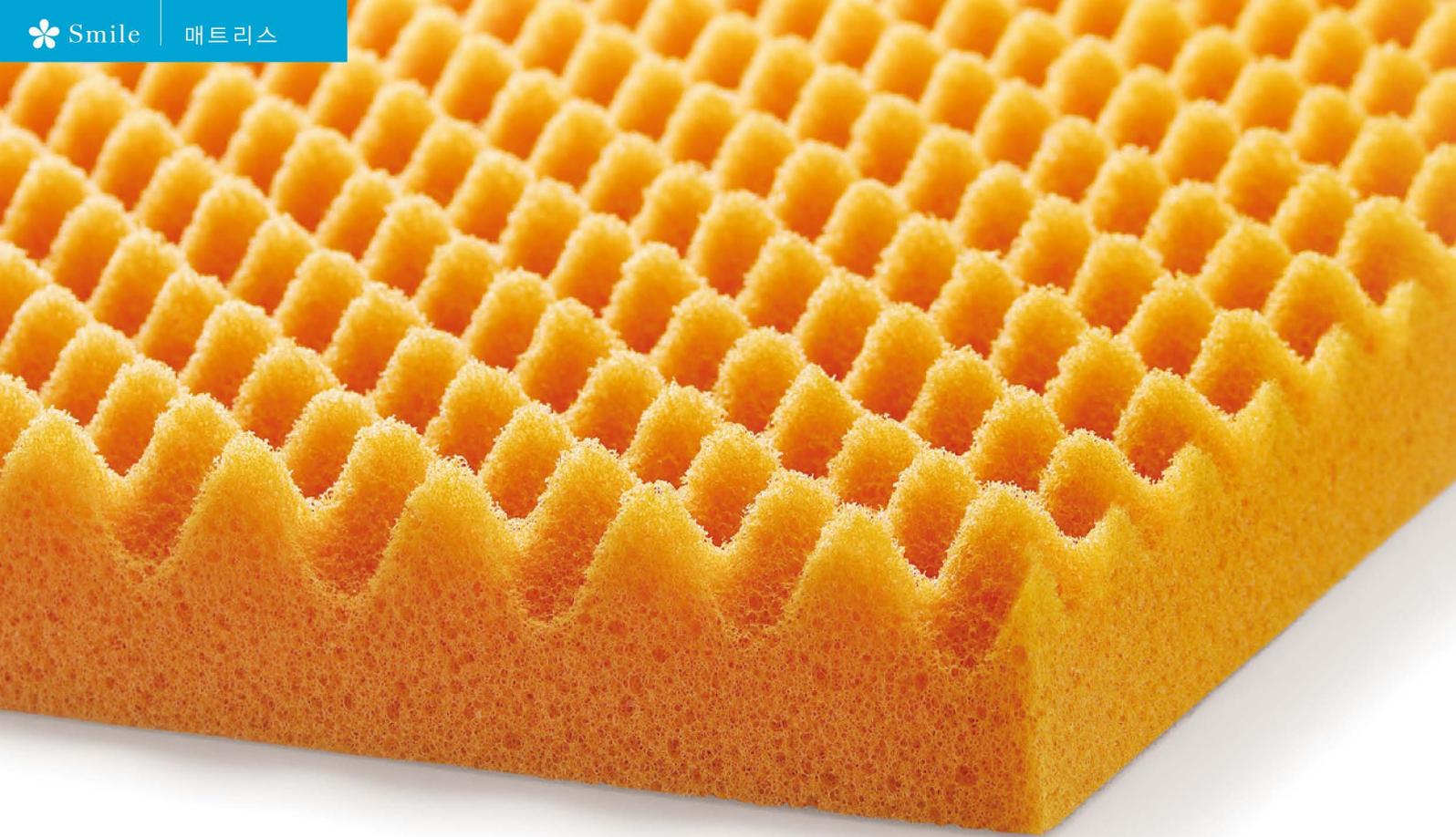

욕창 위험 리스크가 낮은 분부터 재발방지 대응가능

# Airflow 매트리스



통기성이 뛰어난 우레탄폼을 사용하여 세탁이 가능한 매트리스

## 이노악 리빙 매트리스의 추천


이 매트리스는 가정에서 생활하는 고령자들을 위한 아주 좋은 제품입니다. 일정한 두께감과 체중의 흡수능력이 아주 뛰어나기 때문에 사용하시는 분이 일어나기에 편안합니다. 이런 이유 때문일까요? 저희 시설에서 케어가 필요하신 고령자들이 이 제품을 사용하고 일어나기 편하다, 편하게 잤다고 말씀해 주시는 분들이 많습니다. 집에서 요양하시는 분들께 기쁜 소식이라고 생각합니다. 욕창예방에도 탁월한 효과를 보여줍니다.



사회복지법인 지성학사 상무이사 하시모토 마사아키

## 세계최초 기술로 만들어낸 탄성과 통기성이 뛰어난 소재


이노악 독자기술로 개발한 탄성과 통기성이 뛰어난 우레탄폼을 사용.  
우레탄폼의 셀(기포)크기가 랜덤이기 때문에 탄력성과 부드러움을 동시에 느끼실 수 있습니다.

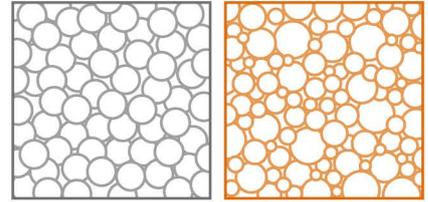

일반 우레탄    Airflow 매트리스 우레탄


## 체압을 분산하는 특수가공

특수 프로파일 가공으로 체압분산성이 높습니다.  
또한 고탄성 우레탄폼으로 수면 중 움직임이 수월해지며 욕창 재발 예방시기의 자립을 지원합니다.

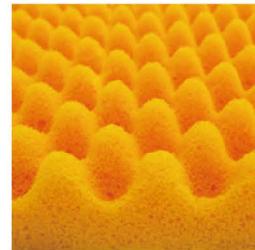

## 뛰어난 통기성으로 통세탁 가능

일반적인 우레탄폼과 비교해 셀(기포)가 크기 때문에 통기성이 매우 좋으며 매트리스에 가득 차기 쉬운 습기도 막아줍니다.  
또한 통세탁이 가능하기 때문에 청결하게 유지 보관할 수 있습니다.

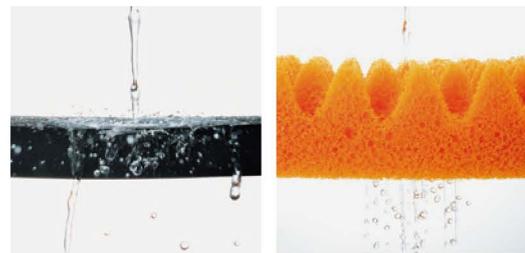

일반 우레탄

Airflow 매트리스 우레탄

■ 선택기준

[체압분산력]

낮음 ●●●●● 높음

[매트리스의 경도]

딱딱함 ●●●●● 부드러움

[이동]

자립 ●●●●● 도움필요



상품명	품번	JAN코드 - TAIS코드	사이즈	중량	정가
Airflow 매트리스 (폭 91)	SSS-101	JAN 4971458662965 TAIS 00357-000075	폭91 × 길이 191 × 두께 8cm	5.3Kg	별도문의
Airflow 매트리스 (폭 83)	SSS-103	JAN 4971458662972 TAIS 00357-000076	폭83 × 길이 191 × 두께 8cm	4.8Kg	

■ 재질 / 우레탄폼(2층)    ■ 컬러 / 블루    ■ 커버 / 폴리에스테르 100%

# 후와모 쿠션

부드러우면서 신체의 곡선에 꼭 맞게 설계되어  
체위변환에 편리한 쿠션 시리즈.




## 특허기술

### mixel<sup>®</sup> CUBE

균일한 큐브 모양으로 잘라 부드럽고 찰진  
촉감의 우레탄 소재. 쿠션 안에서 유동하면서  
신체 곡선에 딱 맞게 변형됩니다.

## \* 놀라운 피트감

후와모는 “사람의 신체는 곡선으로 이루어져 있다”라는 사실에  
착안하여 개발되었습니다.  
부드러운 믹셀 큐브가 신체를 부드럽게 케어해 줍니다.

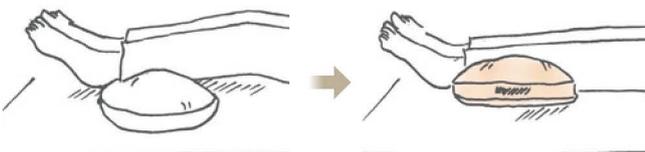

■ 기존의 쿠션

■ 후와모



### 편리한 손잡이

제품운반과 체위변환에 용이하도록  
손잡이가 좌우에 한 개씩 붙어  
있습니다



### 부드러운 커버

촉감이 좋은 신축성 있는 천이  
피트감과 안정감을 선사합니다.  
커버는 가정용 세탁기로 세탁이  
가능합니다.



### ❁ 미카즈키 (대)

대형사이즈로 침상시의 등 부분과 다리의 넓은 면을 지지해 주는데 적합합니다.



### ❁ 미카즈키 (중)

표준적인 사이즈로 앉았을 때, 누운 자세는 물론 다양한 자세에 활용 가능합니다.




### ❁ 미카즈키 (소)

종아리에 끼우거나 포지셔닝 시 빈 공간을 채우는 데에 효과적입니다.



### ❁ 플랫

옆으로 눕는 등 체위변환에 사용하기 편리한 형태입니다.

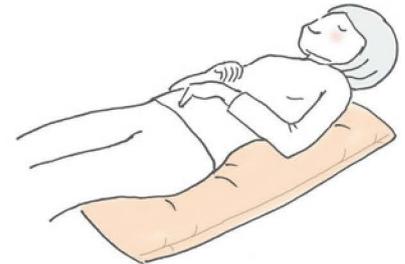

### ❁ 쇼트

누웠을 때나 혹은 의자, 휠체어 등에 앉았을 때 생기는 공간을 채우는 데 효과적입니다.



상품명	품번	JAN코드 - TAIS코드	사이즈	중량	정가
후와모 쿠션 미카즈키 (대)	FMD-9001	JAN 4971458663023 TAIS 00357-000083	폭 90 × 길이 35cm	1,500g	별도문의
후와모 쿠션 미카즈키 (중)	FMD-5601	JAN 4971458663030 TAIS 00357-000084	폭 56 × 길이 43cm	650g	별도문의
후와모 쿠션 미카즈키 (소)	FMD-4601	JAN 4971458663047 TAIS 00357-000085	폭 46 × 길이 30cm	290g	별도문의
후와모 쿠션 미카즈키 플랫	FMD-8101	JAN 4971458663054 TAIS 00357-000086	폭 81 × 길이 34cm	800g	별도문의
후와모 쿠션 미카즈키 쇼트	FMD-5901	JAN 4971458663061 TAIS 00357-000087	폭 59 × 길이 21cm	360g	별도문의

■재질 / 우레탄폼(믹셀큐브)

■속커버 / 폴리에스테르 94%, 폴리우레탄 6%

■컬러 / 베이지

# 자세변환용구(써티패드)



[세탁가능]

쾌적한 자세변환이 가능한 이노악 베스트셀러 상품

## 화이트 시리즈

심플하면서 어떤 공간에도 어울리는  
청결한 인상의 화이트.



800타입  
체격이 크신 분

600타입  
일반 사이즈

400타입  
2개를 활용하여  
적추가 굵은 분들에게

## 카리나 시리즈

작은 꽃무늬 장식으로 배합한,  
이탈리아어로 '귀엽다'라는 의미의 카리나

■ 색상



핑크



화이트



옆으로 누웠을 때 견갑골에서부터  
허리뼈까지를 지탱해 주기 때문에  
몸이 뒤틀리는 것을 막아줍니다.

※ 내용물은 화이트와 동일합니다.

# 써티패드

[방수 타입]

방수타입의 써티패드.  
항상 청결하게 유지 가능합니다.




800타입

600타입

400타입

## 높은 통기성

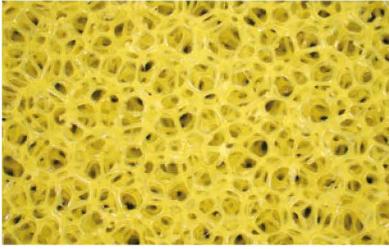


통기성이 좋고 열과 습기가 차기 어려운 3차원 셀 구조 특수폼을 채용하고 있습니다.

## 이중 구조



안쪽 커버 + 바깥 커버의 이중구조가 욕창의 원인이 되는 주름을 막아줍니다. 안쪽 커버는 봉제를 해 두었기 때문에 우레탄을 보호해 주면서 통세탁이 가능합니다.

## 안정된 30도 각도

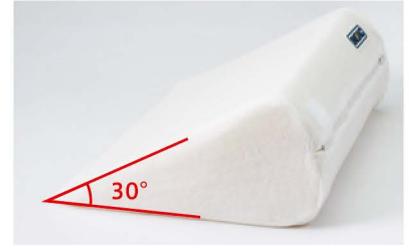

각도가 30도이므로 체위변환이 간단합니다. 그 뒤로도 30도 옆으로 돌아누운 자세도 유지 가능합니다.

### ■ 화이트 시리즈

상품명	품번	JAN코드 - TAIS코드	사이즈	중량	정가
써티패드 화이트 800	DSC-111-800	JAN 4971458616371 TAIS 00357-000002	높이 12 × 길이 80 × 폭 24cm	540g	별도문의
써티패드 화이트 600	DSC-111-600	JAN 4905564061268 TAIS 00357-000028	높이 12 × 길이 60 × 폭 24cm	400g	별도문의
써티패드 화이트 400	DSC-111-400	JAN 4971458616388 TAIS 00357-000002	높이 12 × 길이 40 × 폭 24cm	270g	별도문의

■재질 / 우레탄폼(高通기 타입)    ■속커버 / 폴리에스테르 100%, 겉커버/폴리에스테르 30%, 면70%    ■칼라/화이트

### ■ 카리나 시리즈

상품명	품번	JAN코드 - TAIS코드	사이즈	중량	정가
써티패드 카리나 핑크 800	DSC-222-800	JAN 4905564061978	높이 12 × 길이 80 × 폭 24cm	540g	별도문의
써티패드 카리나 화이트 800	DSC-223-800	JAN 4905564061985			
써티패드 카리나 핑크 600	DSC-222-600	JAN 4905564061923	높이 12 × 길이 60 × 폭 24cm	400g	별도문의
써티패드 카리나 화이트 600	DSC-223-600	JAN 4905564061930			
써티패드 카리나 핑크 400	DSC-222-400	JAN 4905564061879	높이 12 × 길이 40 × 폭 24cm	270g	별도문의
써티패드 카리나 화이트 400	DSC-222-400	JAN 4905564061879			

■재질 / 우레탄폼(高通기 타입)    ■속커버 / 폴리에스테르 100%, 겉커버/폴리에스테르 24%, 면76%    ■칼라/핑크, 화이트

### ■ 전용커버(화이트)

상품명	정가
전용 커버 화이트 800	별도문의
전용 커버 화이트 600	별도문의
전용 커버 화이트 400	별도문의

### ■ 전용커버(카리나) 핑크/화이트

상품명	정가
전용 커버 카리나 핑크 800	별도문의
전용 커버 카리나 화이트 800	
전용 커버 카리나 핑크 600	별도문의
전용 커버 카리나 화이트 600	
전용 커버 카리나 핑크 400	별도문의
전용 커버 카리나 화이트 400	

## 방수, 냄새제거 커버

커버에 고기능 위생 방수천 [에스테디마AG]를 채용. 이온에 의해 세균 번식을 막아주며 냄새도 제거해 줍니다.

## 미끄럼방지

커버에 미끄럼방지 소재를 적용. 신체 아래에 포개기 간편하며 미끄러지지 않기 때문에 안정된 자세변환이 가능합니다.

상품명	품번	JAN코드 - TAIS코드	사이즈	중량	정가
써티패드 800	DSP-800	JAN 4971458659408 TAIS 00357-000072	높이 12 × 길이 80 × 폭 24cm	450g	별도문의
써티패드 600	DSP-600	JAN 4971458659415 TAIS 00357-000073	높이 12 × 길이 60 × 폭 24cm	350g	별도문의
써티패드 400	DSP-400	JAN 4971458659422 TAIS 00357-000074	높이 12 × 길이 40 × 폭 24cm	230g	별도문의


■재질 / 우레탄폼    ■커버 / 폴리에스테르 100%, 겉커버/폴리에스테르 100%, 우레탄필름 라미네이트, 방수/방균방취가공    ■칼라 / 실버

# 파인비즈 쿠션

파우더 같이 섬세한 비즈가 부드럽게 신체를 케어해 줍니다.

## 〈칸막이〉

적당히 늘어나는 신축성 있는 패브릭을 사용.  
내부에는 사이막을 설치.  
상하 2층으로 나뉘어져 있기 때문에 비즈가 넓게 퍼지는 것을 막아주며 마찰이 일어나는 것을 막아 줍니다.

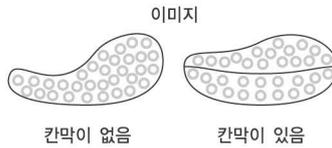


## 오오마메

정강이 등, 주로 하체의 포지셔닝에 활용할 수 있습니다.



## 소라마메

발 뒤꿈치의 거상과 옆으로 누울 때에 보조역할, 관절 등에 해당하는 부분을 보조해 줍니다.

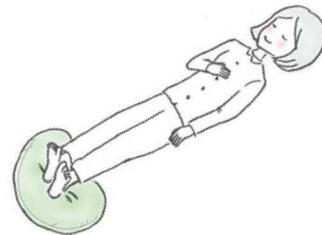

## 코마메

상체의 포지셔닝 등 다목적으로 사용 가능합니다.



## 스퀘어

다리 부분의 거상, 보호 등 다목적으로 활용 가능합니다.



## 다키마쿠라

안는 베개로 반엎침 자세 등 신체를 케어해 줄 때 편리합니다.



상품명	품번	JAN코드 - TAIS코드	사이즈	중량	정가
파인비즈 쿠션 오오마메	FBC-6301	JAN 4971458657152 TAIS 00357-000068	두께 12 × 길이 63 × 폭 40cm	670g	별도문의
파인비즈 쿠션 소라마메	FSC-4301	JAN 4905564061145 TAIS 00357-000026	두께 43 × 길이 27 × 폭 12cm	280g	별도문의
파인비즈 쿠션 코마메	FKC-2301	JAN 4905564061695 TAIS 00357-000026	두께 32 × 길이 20 × 폭 8cm	110g	별도문의
파인비즈 쿠션 스퀘어	FQC-3301	JAN 4905564061671 TAIS 00357-000049	두께 33 × 길이 33 × 폭 8cm	230g	별도문의
파인비즈 쿠션 다키마쿠라	FDS-1001	JAN 4905564061183 TAIS 00357-000041	두께 90 × 길이 23 × 폭 10cm	620g	별도문의

■재질 / 폴리스티렌 파인비즈    ■커버 / 폴리에스테르 100%    ■컬러 / 그린

# 면소재 커버 쿠션



촉촉한 발포 비즈를 통기성 좋은 면소재 커버로 덮었습니다.

## 부메랑 쿠션

L 사이즈



R 사이즈



M 사이즈



앉을 때 상체 지지에 사용할 수 있으며 독서 하기에 편리한 형태입니다.



휠체어에 앉았을 때 쿠션으로도 활용 가능합니다.

## 사각 쿠션



포지셔닝 시 다양한 용도로 신체를 지탱해 주기 때문에 편리합니다.

상품명	품번	JAN코드 - TAIS코드	사이즈	중량	정가
부메랑 쿠션 L	DSC-2010-A	JAN 4905564060155 TAIS 00357-000009	두께15 × 길이67 × 폭116cm	1,500g	별도문의
부메랑 쿠션 R	DSC-2010-R	JAN 4905564061169 TAIS 00357-000027	두께13 × 길이53 × 폭 95cm	800g	별도문의
부메랑 쿠션 M	DSC-2010-B	JAN 4905564060162 TAIS 00357-000009	두께9 × 길이41 × 폭 67cm	400g	별도문의

상품명	정가
전용커버 L	별도문의
전용커버 R	별도문의
전용커버 M	별도문의

상품명	품번	JAN코드 - TAIS코드	사이즈	중량	정가
사각 쿠션	DSC-2020	JAN 4905564060193	두께 12 × 길이 33 × 폭 42cm	450g	별도문의

■재질 / 폴리스틸렌 파인비즈

■커버 / 면 100%, (항균, 방취가공)

■컬러 / 화이트

# Swimo™ (스이모)

특허등록완료

휠체어에서 보다 일어나기 편리하도록 기능적 활동을 생각한  
자립지원형 쿠션입니다.



내부

※ 커버세탁 가능

체형에 맞게 조절 가능한  
옵션 쿠션 증정

체구가 크신 분은 좌면의 꺼짐을 막아주는  
쿠션으로 조절


체격이 왜소하신 분이나 마르신 분은  
좌면 정가운데의 높이를 낮춰, 보다  
높은 안정감을 실현.



※ 휠체어는 미포함입니다.

## 일어나기 수월하기 때문에 보호자의 부담도 경감

블록 솜은 대퇴지지부와 골반을 감싸고 있는 듯한 형상의 골반지지부를 합친 3차원 구조가 특징인 쿠션입니다.

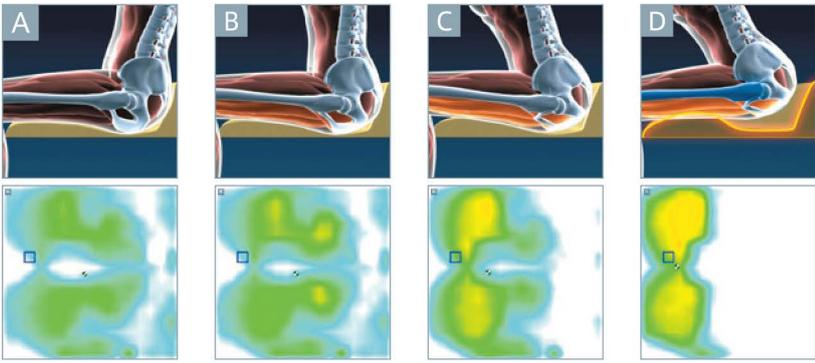

A 휠체어 등받이에 가볍게  
기댄 안정된 자세  
B 상체를 수직으로 세운  
기본 자세  
C 상체를 약간 앞으로 숙인  
식사시 취하는 자세  
D 일어나는 도중의 대퇴부  
지지 자세

안정적인 A의 자세에서는 뛰어난 체압분산을 실현. 전방옹기부와 엉덩이를 감싸는 듯한 형상으로 자세 교정을 도와줍니다. 등받이에 기대지 않고 바르게 앉은 B와 같은 자세에서는 좌골 반동력이 증가. 항중력적 활동을 자극합니다. C와 같은 자세에서는 대퇴지지부가 안정감있는 자세변환을 용이하게 해주며 기능적 활동을 도와줍니다. 의자에서 일어나는 D와 같은 때에는 엉덩이에서 발끝까지의 하중 이동의 중개역할을 해 주며 일어나는 동작을 서포트해 줍니다

## 일본의 재활전문시설 아마쿠사병원과 공동개발

작업치료사로 35년 이상의 임상경험을 가지고 있음과 동시에 타 병원의 요법사교육과 7개의 양성학교 특별교사를 겸임 중. 급성기~생활기의 재활기간 중에서도 고령자와 장애인의 생활을 지원하는 환경의 중요성을 통감하고 2년전부터 이노악 리빙과 공동으로 동적 좌위쿠션의 개발을 진행하고 있습니다.

재활 아마쿠사병원 스키모도 작업치료사



상품명	품번	JAN코드 - TAIS코드	사이즈	중량	정가
Swimo™ (스이모)	KG1417	JAN 4971458665744 TAIS 취득 중	두께12.5 × 길이40 × 폭42cm (좌판 두께 1cm)	0.7Kg	별도문의

■ 재질 / 폴리우레탄폼 커버 : 폴리에스테르 100%(특정용도제균가공), 우레탄폼 라미네이트  
■ 바닥 : 폴리에스테르 100%, PVC 필름 라미네이트 ■ 컬러 / 블루

# 로코모매트 (롱타입)



운동기능저하증후군(로코모티브 신드롬) 예방을 위한 매트입니다.  
길이가 180cm이기 때문에 재활 목적으로도 사용 가능합니다.



※ 손잡이는 포함되어 있지 않습니다.

점탄성있는 사막모래 같은 부드러운 촉감의 우레탄폼을 사용하여 적절한 체중부하운동이 가능합니다.

## 밸런스 감각을 단련

일부러 매트 위에서 불안정 상태를 만들어 줌으로써 밸런스 감각을 단련시킬 수 있습니다.  
운동기능저하증후군 예방 뿐만 아니라 밸런스 능력 훈련도 동시에 진행할 수 있습니다.

## 근력 강화

천천히 밟아 줌으로써 무릎을 높게 들어 운동이 될 뿐만 아니라 근력도 강화할 수 있습니다. 나이가 들면서 근력이 저하되는 것을 막아주며 보행에 필요한 근력을 유지. 특히 정강이와 골반의 근력 업그레이드가 눈에 띄며 전도예방에 도움을 줍니다.

# 로코모매트

운동기능저하증후군 예방을 어디에서나 간편하게 할 수 있습니다.



50cm로 공간 차지 최소화

방수 커버로 유지관리에 용이

로코모매트 사용시 보통 1.3배의 부하가 다리에 걸려 근력이 증강된다는 연구결과로 일본 전도(顛倒)예방학회의 추천을 받음

상품명	품번	JAN코드 - TAIS코드	사이즈	중량	정가
로코모매트(롱타입)	LCL-618	JAN 4971458664143	두께 6 × 길이 180 × 폭 50cm	2.9Kg	별도문의
로코모매트	LCM-5001	JAN 4971458655523	두께 6 × 길이 50 × 폭 50cm	850g	별도문의

■재질 / 폴리우레탄폼 커버 : 폴리에스테르 100%, 우레탄폼 라미네이트, 방수/특정용도제균, 난연가공, 바닥면: 미끄럼방지


■컬러 / 그린

# 충격방지침대 II



## 부드러운 소재로 충격완화

소재는 100% 우레탄폼으로 금속 재료를 전혀 사용하지 않았습니다. 신체와 접촉하여도 전혀 아프지 않습니다. 더욱이 낮게 설계하였기 때문에 혹시나 침대에서 떨어지더라도 보통 침대보다는 충격이 덜합니다.

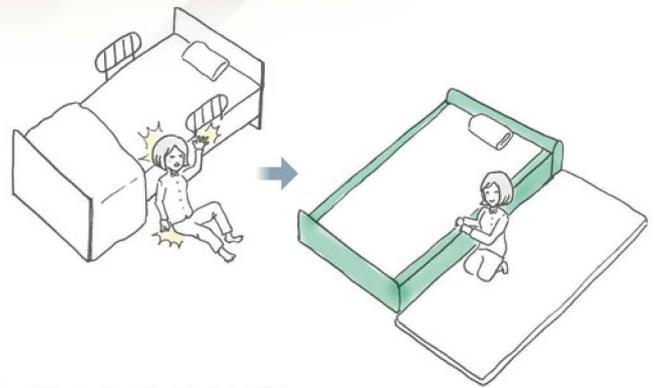


## 침대 선단에 걸터 앉기가 가능하며, 일어나기에도 용이

침대 선단 부분을 15cm로 넓게 설정. 조금 딱딱한 우레탄폼으로 제작되어 걸터 앉을 수 있으며 일어날 때에도 편합니다.



## 가볍기 때문에 이동도 간단

100% 우레탄폼으로 만들어 찢기 때문에 무게가 가벼워 이동이 수월합니다.

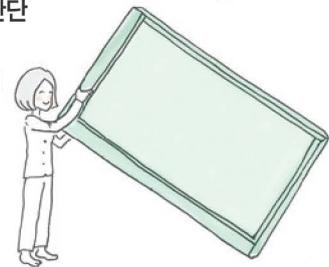

상품명	품번	JAN코드 - TAIS코드	사이즈	중량	정가
충격방지침대II	FF2-101	JAN 4971458664136	두께 20 × 길이 212 × 폭 114cm	10Kg	별도문의

■적응 매트리스 / 83 × 191cm

■재질 / 폴리우레탄폼 커버 : 폴리에스테르 100%, 우레탄필름 라미네이트, 방수/특정용도제균/난연가공



# 침대 사이드매트 II


두께가 불과 1.8cm의 얇은 두께로 전도(넘어짐 사고)의 충격을 완화시켜 줍니다.



## 충격흡수성능

에너지 흡수성이 뛰어난 고기능 우레탄폼을 사용하여 충격을 확실히 흡수해 줍니다. 한 개씩 틀에 넣어 찍어내는 특수한 제조 방법으로 생산하고 있습니다.

— 제품 없는 바닥면  
— 침대 사이드매트

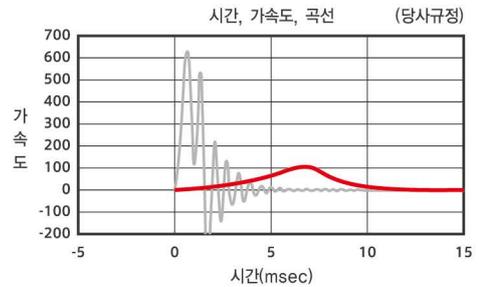

## 두께 1.8cm

보행시 방해가 되지 않을 정도의 두께(1.8cm)이며, 가장 자리를 비스듬하게 가공하여 단차가 느껴지지 않도록 가공하였습니다. 발을 끌며 걷는 고령자들도 걸려 넘어지지 않도록 디자인 되었으며, 사용시에는 딱딱한 느낌도 받지 않습니다.



## 고급스러운 디자인

매트의 가장자리에는 화려하지 않으면서도 멋스러운 문양을 새겼습니다. 다크브라운의 차분한 색조합으로 방안에서 포인트를 주기 좋습니다.



상품명	품번	JAN코드 - TAIS코드	사이즈	중량	정가
침대 사이드매트 II	KG1404	JAN 4971458665447	두께 1.8 × 길이 150 × 폭 60cm	3.7Kg	별도문의

■ 재질 / 폴리우레탄폼

■ 컬러 : 다크브라운

# 탭매트 드라이





매트리스 위에 한 장 더 플러스 함으로써  
적당한 쿠션감을 느낄 수 있을 뿐만 아니라 체압분산 또한  
간단해 집니다.



## 통기성 있는 소재로 통세탁이 가능


속재료 우레탄폼의 막을 없앤 특수소재를 사용. 통기성이 뛰어나 땀이 잘 차지 않습니다. 큰 셀(기포)와 작은 셀이 랜덤으로 혼재되어 있기 때문에 부드러운 쿠션감을 느낄 수 있습니다. 두께 2cm에 통기성 있는 내부소재와 빠르게 건조되는 걸커버를 사용하여 통째로 세탁이 가능합니다.

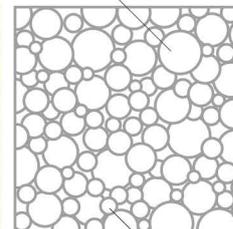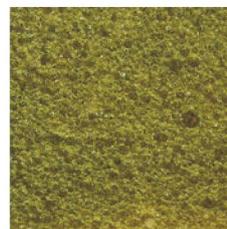

작은 셀

## 깔아 두기만 해도 체압 분산이 가능

가지고 계시는 침구에 깔아 두는 것만으로도 쿠션감이 향상. 불과 2cm 밖에 되지 않지만 침구와 신체 사이에 생기는 공간을 적절하게 막아줌으로써 체압을 분산시켜 줍니다.

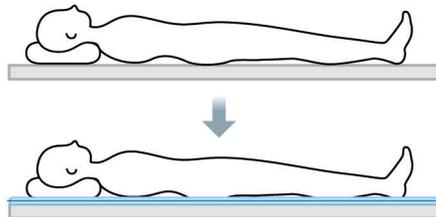

## 뒷면 고무 부착

매트 뒷면에 고무를 부착해 두었습니다. 전동침대의 각도 조절시 매트가 흐트러지는 것을 막아 줍니다.



상품명	품번	JAN코드 - TAIS코드	사이즈	중량	정가
탭매트 드라이 (폭 91)	TMD-111	JAN 4971458664167	두께 2 × 길이 191 × 폭 91cm	2.1Kg	별도문의
탭매트 드라이 (폭 83)	TMD-101	JAN 4971458664174	두께 2 × 길이 191 × 폭 83cm	1.9Kg	별도문의

■재질 / 폴리우레탄폼, 커버 : 폴리에스테르 100%

■컬러 : 블루

# 소프트 벽쿠션



벽에 가볍게 떼었다 붙였다 할 수 있는 충격흡수 쿠션입니다.



계단



욕실



화장실

## 간단한 탈부착

뒷면에 특수소재 '퓨어셀'을 사용. 자기점착성이 있어 벽에 간단히 붙습니다. 또 접착부분의 강도가 떨어진 경우 물로 씻어내면 다시 회복합니다. 간편하게 몇 번이고 탈부착 가능합니다.

## 청결함 유지

접착제를 사용하지 않기 때문에 벽에 접착제가 남거나, 벽지가 벗겨지는 등의 문제가 발생하지 않습니다.



## 충격흡수

표면에는 무게가 가벼우면서도 쿠션성이 있는 폴리에틸렌폼을 사용하여 넘어지더라도 이 쿠션이 충격을 경감시켜 줍니다.

상품명	품번	JAN코드 - TAIS코드	사이즈	컬러	정가
소프트 벽 쿠션	KG1399	JAN 4971458664884	두께1.6 × 길이30 × 폭30cm	브라운	별도문의


■재질 / 표면 : 폴리에틸렌폼    겉면 : 아크릴폼  
 ※표면이 울퉁불퉁한 곳에서는 사용할 수 없습니다.

# 욕실 쿠션매트



완전 방수타입의 쿠션매트. 욕실 등 물기가 많은 곳에서 사용할 수 있습니다.

- 여러 개 이어서 희망 사이즈로 사용 가능
- 불필요한 부분은 칼로 간단하게 커팅 가능

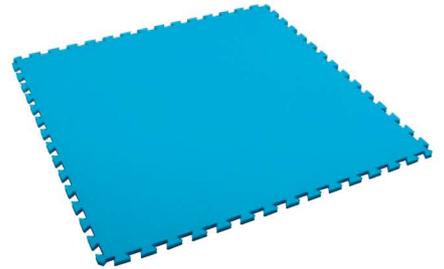

상품명	품번	JAN코드 - TAIS코드	사이즈	중량	정가
욕실 쿠션 매트	MCM-1001	JAN 4905564062135	두께1.5 × 길이100 × 폭100cm	1.5Kg	별도문의

■재질 / EVA폼    ■컬러 : 블루

# 소프트 발보호대



특수 메모리폼 우레탄폼이 발을 부드럽게 감싸줍니다.

- 양말을 신는 것 보다 간단하게 발 주변 보호 가능
- 세탁이 가능하여 청결함 유지
- 침대 위에서 누워있을 때나 휠체어에 타고 있을 때에도 사용 가능
- 혈액순환을 촉진시켜주며 다리 전체의 혈류 개선도 기대
- 발 뒷꿈치와 복숭아뼈에 걸리는 압력을 분산시켜 욱창을 예방



상품명	품번	JAN코드 - TAIS코드	사이즈	중량	정가
소프트 발워머	UFW-1001	JAN 4905564061206 TAIS 00357-000038	높이21 × 길이30 × 폭16cm	200g 한쌍기준	별도문의

■재질 / 우레탄폼, 폴리에스테르    ■컬러 : 베이지

# 이노악 코퍼레이션에 대하여


스미레는 우레탄폼 전문제조회사인 '이노악 코퍼레이션'이 제공하는 의료 복지용품의 종합 브랜드입니다. 이노악의 고분자 테크놀로지가 스미레의 품질을 보장합니다.

## 회사 개요

사 명	주식회사 이노악 코퍼레이션 (INOAC CORPORATION)
설 립	1954년
자 본 금	7억 2,000만엔
대 표	이노우에 소이치
사 원 수	약 25,000명
매 출 액	약 4조원

## 사업 개요

우레탄, 고무, 플라스틱, 복합재를 베이스로 재료개발과 자동차, 이륜, 정보/IT기기, 주택/건설관련에서부터 생활관련상품, 코스메틱 용품까지 생활에 밀접한 제품을 취급하고 있습니다.
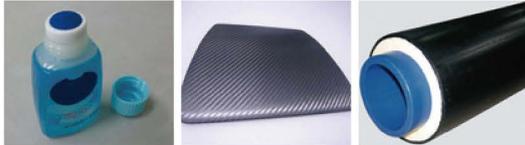
<p>■ 우레탄</p>  <p>스폰지      마이크로셀 폴리머 시트 PORON®      자동차 내장부품</p>	<p>■ 플라스틱</p>  <p>투명 화장품기      지중열 교환 시스템용 파이프 U폴리파이      자동차 외장부품</p>
<p>■ 고무</p>  <p>각종 고무부품      실 부품재      라텍스 스폰지 퍼프</p>	<p>■ 신소재&amp;복합소재</p>  <p>물파스 패드 (MAPS)      탄소섬유 강화 플라스틱 CFRP      교량연결관·동결 방지용 피복관</p>

## History

우레탄폼 생산개시 60주년, 이노악의 역사는 일본 우레탄폼의 역사입니다.

1926

이노우에 제조소를 설립하여 자동차용 타이어, 튜브 생산 개시. 사진은 당시 본점.



1933

IRC 브랜드의 타이어, 튜브 수출을 시작으로 해외활동 개시. 사진은 그 당시의 수출풍경.



1954

독일 바이에르사와의 기술 제휴에 의해 몰토폴렌 생산기술을 도입. MTP 화성(株)을 설립



1955

일본 최초로 우레탄폼 국산화에 성공. 사진은 당시 몰토폴렌 제품의 카탈로그



1959

폴리에테르계 폼 [Color Foam]를 출시하여 침구 분야에 진출




1959

스리랑카에 해외 첫 합병회사를 설립하여 자동차용 타이어, 튜브 및 공업용 고무 제품 생산을 개시



## 매출

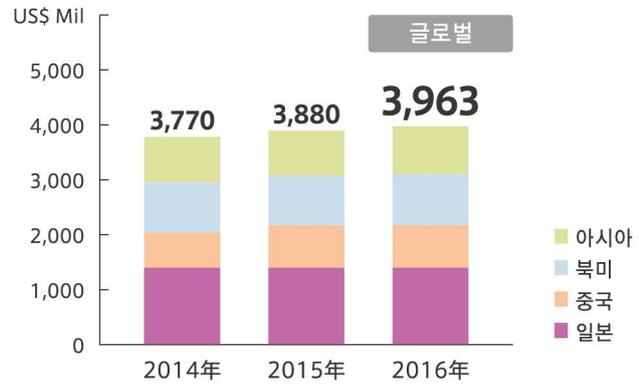

## 거점 / 네트워크

### 【일본 주요 거점】

**본사** 나고야시 나카무라구 나마에키미나미 2-13-4  
**본사 (동경)** 도쿄도 시나가와구 오사키 2-9-3(오오사키 웨스턴 시티 빌딩)  
**지점** 도쿄, 나고야, 오사카, 큐슈  
**영업소** 삿포로, 도호쿠, 하마마츠, 히로시마

### 【해외 주요 거점】

**<북미, 중남미 /19사>** 미국 11사, 캐나다 3사, 멕시코 5사  
**<중국 /50사>** 중국본토 48사, 홍콩 2사  
**<아시아 /42사>** 태국 15사, 대만 3사, 인도네시아 5사, 베트남 6사, 한국 2사, 싱가포르 5사, 필리핀 1사, 말레이시아 4사, 스리랑카 2사

### 【한국 거점】

**서울 영업소** 경기도 용인시 수지구 신수로 767, 유타워 A동 1212호 (주)이노악코리아  
**창원 공장** 경남 창원시 마산회원구 자유무역5길 100

1973

합병회사를 설립하여 고급가구를 제조, 판매하며 본격적으로 가구분야에 진출



1980

이노우에공업(주)의 공업 용고무, 플라스틱 부분과 MTP화성(주)가 합병하여 이노우에MTP(주)를 설립. 그룹 통일 브랜드 INOAC 탄생



1990

이노우에 MTP(주)에서 (주)이노악 코퍼레이션으로 사명변경. 이 때 현재까지 사용 중인 로고마크도 결정



1997

복지, 시니어 용품 분야에 진출



2011

스리랑카에 우레탄폼 제조 판매회사를 설립



2015

우레탄폼 생산개시 60주년을 맞이하여 'PU포럼 2015'을 개최



# Global

세계를 무대로 글로벌한 연구개발 · 생산 · 판매 네트워크를 확보하고 있습니다.

이노악 그룹의 해외사업 시작은 1933년 이노우에 제조소가 IRC 브랜드인 타이어, 튜브의 수출사업을 시작한 때로 거슬러 올라갑니다. 그 이후 1959년에 스리랑카에 자동차 타이어를 생산하는 합병기업을 설립하는 등 여러가지 방면으로 사업의 해외전개를 도모해 왔습니다. 현재는 일본 이외에 한국을 포함한 14개의 국가와 지역에 100개 이상의 거점을 보유하고 있으며 연구개발부터 생산 및 판매에 이르기까지의 모든 과정을 제안, 제공하는 글로벌 네트워크를 구축하게 되었습니다. 그 결과 현재, 그룹 매출 중 해외거점이 차지하는 비율이 과반수를 넘게 되었습니다. 앞으로 해외 생산공장을 이동하는 등 글로벌 전개는 더욱 가속될 것입니다.



# Environment

지금까지 키워온 이노악의 기술을 앞으로는 지구를 위해

이노악은 새롭게 환경사업부를 만들어 1) 클린소재의 제공 2) 리사이클 사업 3) 수도환경 비즈니스 4) 농업, 녹화사업 5) 재생 에너지 사업 6) 화학 에너지 7) 방음, 방진, 흡음소재, 제품)의 7가지 항목으로 분류하여 [환경에 좋은] 제품개발, 사업전개를 진행하고 있습니다. 이노악은 생활을 안전, 건강, 쾌적하게 하는 것은 물론, 지구환경 보전에 공헌할 수 있는 제조, 생산 프로세스, 서비스를 제공하도록 여러가지 기업활동에도 힘을 쏟고 있습니다.



# CSR

기업시민으로써 역할을 다하는 사회공헌활동

이노악은 경제활동을 통해 사회에 공헌하는 것 뿐만 아니라 풍요롭고 지속가능한 사회 실현을 위해 다양한 활동을 이어가고 있습니다. 문화지원과 인재육성이 중심이 된 사회공헌활동을 추진하여 여러 사람들 과의 교류와 그곳에서 생기는 마음의 교류가 더욱 커질 수 있도록 서포트하고 있습니다.

## 보유부동산을 의료 실버시설로 전환

일본은 총인구의 25%이상이 고령자인 초고령화 사회를 맞이하여 고령자의 수는 갈수록 늘어날 것으로 예측하고 있습니다. 이러한 사회에 대응하기 위해 보유 중인 부동산을 적극적으로 고령자용 시설로 전환. 고령자용 시설 부족의 해소를 목표로 하고 있습니다.



2016년에 설립한 실버시설 [마음의 숲]. 시설내에서는 '스미레' 제품을 사용하고 있습니다.

## 2016년 구마모토 지진 재해지원

구마모토 지진에서 피해를 입은 분들을 위해 전 세계 이노악 그룹에 기부금 모집을 요청하였습니다. 국내 주요 사무소, 계열회사, 관련회사 35개 거점을 시작으로 북미와 아시아 등 전세계에서 기부금이 모금되었습니다.



(주)큐슈 칼라폼이 매트리스의 생산, 지원물자로서 제공



키쿠치 공장 제조의 2L 페트병 용기를 급식소에 제공

# 상품 일람표

	상품명	품번	JAN코드	TAIS코드
P08 - 09	리버서블 PRO 매트리스 프리미엄 (폭91)	KG1416	4971458665720	00357-000095
	리버서블 PRO 매트리스 프리미엄 (폭83)	KG1415	4971458665713	00357-000096
P10 - 11	리버서블 PRO 매트리스 (폭91)	URP-101	4905564060810	00357-000020
	리버서블 PRO 매트리스 (폭83)	URP-103	4905564060087	00357-000007
P12	라이트 PRO 매트리스 (폭91)	ULP-101	4905564060858	00357-000022
	라이트 PRO 매트리스 (폭83)	ULP-103	4905564060100	00357-000012
P13	컴포트 PRO 매트리스 (폭91)	CFP-101	4905564061350	00357-000031
	컴포트 PRO 매트리스 (폭83)	CFP-103	4905564061367	00357-000031
P14 - 15	Airflow 매트리스 (폭91)	SSS-101	4971458662965	00357-000075
	Airflow 매트리스 (폭83)	SSS-103	4971458662972	00357-000076
P16 - 17	후와모 쿠션 미카즈키 (대)	FMD-9001	4971458663023	00357-000083
	후와모 쿠션 미카즈키 (중)	FMC-5601	4971458663030	00357-000084
	후와모 쿠션 미카즈키 (소)	FMS-4601	4971458663047	00357-000085
	후와모 플랫	FFR-8101	4971458663054	00357-000086
	후와모 쇼트	FSH-5901	4971458663061	00357-000087
P18 - 19	써티패드 화이트 800	DSC-111-800	4971458616371	00357-000002
	써티패드 화이트 600	DSC-111-600	4905564061268	00357-000028
	써티패드 화이트 400	DSC-111-400	4971458616388	00357-000002
	전용커버 화이트 800	DPC-111-800	4905564060452	
	전용커버 화이트 600	DPC-111-600	4905564061275	
	전용커버 화이트 400	DPC-111-400	4905564060469	
P18 - 19	써티패드 카리나 핑크 800	DSC-222-800	4905564061978	
	써티패드 카리나 화이트 800	DSC-223-800	4905564061985	
	써티패드 카리나 핑크 600	DSC-222-600	4905564061923	
	써티패드 카리나 화이트 600	DSC-223-600	4905564061930	
	써티패드 카리나 핑크 400	DSC-222-400	4905564061879	
	써티패드 카리나 화이트 400	DSC-223-400	4905564061886	
	전용커버 카리나 핑크 800	DPC-222-800	4971458651853	
	전용커버 카리나 화이트 800	DPC-223-800	4971458651860	
	전용커버 카리나 핑크 600	DPC-222-600	4971458651877	
	전용커버 카리나 화이트 600	DPC-223-600	4971458651884	
	전용커버 카리나 핑크 400	DPC-222-400	4971458651891	
	전용커버 카리나 화이트 400	DPC-223-400	4971458651907	
P18 - 19	써티패드 800	DSP-800	4971458659408	00357-000072
	써티패드 600	DSP-600	4971458659415	00357-000073
	써티패드 400	DSP-400	4971458659422	00357-000074
P20	파인비즈 쿠션 오오마메	FBC-6301	4971458657152	00357-000068
	파인비즈 쿠션 소라마메	FSC-4301	4905564061145	00357-000026
	파인비즈 쿠션 코마메	FKC-3201	4905564061695	00357-000047
	파인비즈 쿠션 스퀘어	FQC-3301	4905564061671	00357-000049
	파인비즈 쿠션 다키마쿠라	FDS-1001	4905564061183	00357-000041
P21	면소재 커버쿠션 - 부메랑쿠션 L	DSC-2010-A	4905564060155	00357-000009
	면소재 커버쿠션 - 부메랑쿠션 R	DSC-2010-R	4905564061169	00357-000027
	면소재 커버쿠션 - 부메랑쿠션 M	DSC-2010-B	4905564060162	00357-000009
	전용커버 L	DPC-2010-A	4905564060176	
	전용커버 R	DPC-2010-R	4971458651846	
	전용커버 M	DPC-2010-B	4905564060186	
	면소재 커버쿠션 사각쿠션	DSC-2020	4905564060193	
P22	SWIMO(스이모)	KG1417	4971458665744	취득중
P23	로코모매트 (롱타입)	LCL-618	4971458664143	
	로코모매트	LCM-5001	4971458655523	
P24	충격방지침대 II	FF2-101	4971458664136	
P25	침대 사이드매트 II	KG1404	4971458665447	
P26	탑매트 드라이 (폭91)	TMD-111	4971458664167	
	탑매트 드라이 (폭83)	TMD-101	4971458664174	
P27	소프트 벽쿠션	KG1399	4971458664884	
P27	욕실 쿠션매트	MCM-1001	4905564062135	00357-000038
P27	소프트 발보호대	UFW-1001	4905564061206	



## (주) 이노악 코리아

[서울본사] 경기도 용인시 수지구 신수로 767 유타워 A동 1212호  
TEL 031-525-3700 FAX 031-525-3702

<http://www.inoac.co.jp>

- 제품개선을 위해 예고없이 제품 사양을 변경하는 경우가 있습니다.
- 제품사진은 인쇄 관계상, 실제 색상과 다소 차이가 있을 수 있습니다.
- 제품의 수치, 중량수치는 오차가 있을 수 있습니다. 또한 표시를 알기 쉽게 하도록 수치는 [약]을 생략하고 있습니다.
- 제품, 서비스에 관한 문의사항은 폐사로 연락주시기 바랍니다.

